



**CASTELLINI**  
PASSION FOR DENTISTRY SINCE 1935



C-17 C-22 C-28

SIMPLE Y PRESTANTE

**Mundo Médico  
Dental**



# COMPLETO Y VERSÁTIL



## **DISPLAY LCD CON BOTONERA**

El display LCD con botonera está dotado de iconos gráficos claros e intuitivos. El trabajo del operador resulta simple e inmediato, dado que todos los datos a disposición aparecen en el display. Fácil de instalar con un sencillo procedimiento guiado que ayuda a realizar la primera configuración.

## **ARRANQUE DIFERIDO**

La opción de arranque diferido permite aplazar el inicio de los ciclos de esterilización para racionalizar el uso de la máquina.

## **SECADO EXTRA**

Esta función permite programar el tiempo de secado de forma personalizada para aquellas cargas más difíciles.

## **CICLO CUSTOM**


Los parámetros del ciclo pueden ser programados según las propias necesidades con total seguridad, eligiendo en un rango de valores conforme a la ley.

## **CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR**

Permite acceder al autoclave al personal autorizado. Al ingresar un código de identificación (PIN), se mantendrá un registro cronológico del uso de la máquina que asegura el control de los procesos.

## **AVISO DE PRUEBAS**

Al programar esta función desde el display, C indicará al operador cuando es necesario efectuar las pruebas Vacuum, Helix o Bowie & Dick. Por consiguiente, ya no será posible olvidar estas importantes operaciones.

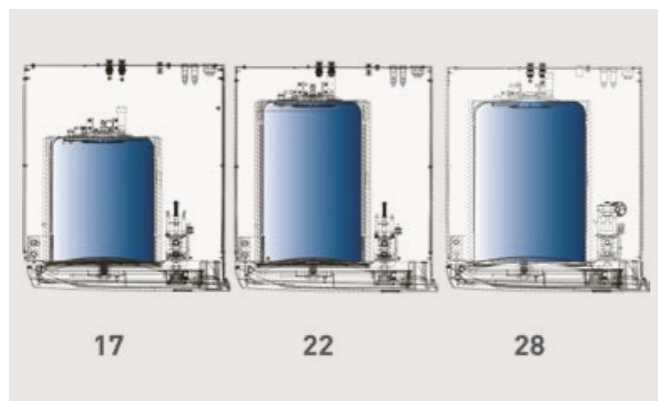

C-17 C-22 C-28

## **TRES CAPACIDADES. UN SOLO TAMAÑO**

La línea C está disponible con 17, 22 y 28 litros de capacidad. Tres capacidades diferentes para que el usuario pueda escoger la máquina que más se adapta a sus necesidades. Las medidas externas, que son idénticas en las tres máquinas, ofrecen facilidad de instalación. Los modelos de 17 y 22 litros cuentan con cinco bandejas, mientras que la versión de 28 litros tiene seis.

SIMPLE Y PRESTANTE

# CONECTIVIDAD Y TRAZABILIDAD TOTALES

Al final de cada ciclo, la máquina guarda un informe en la memoria. El usuario podrá descargarlo en cualquier momento (en formato PDF) mediante el puerto USB ubicado al frente de la máquina. Como alternativa, se puede efectuar la descarga automática gracias al software DataSter.



## **ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA CON EASY CHECK**

Todos los autoclaves de la línea C están equipados con WiFi integrado y puerto Ethernet. Conectándolos a Internet y activando el servicio Easy Check, pueden recibir asistencia remota. Se reduce drásticamente el tiempo de asistencia, con lo que el técnico puede mantener la eficiencia de las máquinas de forma constante.



## **SOFTWARE DATASTER PARA DESCARGAR DATOS**

### **AUTOMÁTICAMENTE**

DataSter viene incluido de fábrica con la máquina y permite descargar automáticamente los informes de los ciclos directamente a una carpeta en red o del PC. Al finalizar el ciclo, el autoclave envía un archivo en formato PDF a la carpeta seleccionada.



## **IMPRESORA**

Para completar la línea C, se encuentra disponible como accesorio opcional una impresora externa capaz de imprimir informes o etiquetas con códigos de barras.



## **SOFTWARE DE TRAZABILIDAD**

MyTrace es el software de trazabilidad para la línea C. Gracias a este programa se puede asociar el set de instrumentos esterilizados con el paciente con un código de barras. Una herramienta irremplazable para completar el proceso de esterilización y asegurar protección legal al odontólogo.



## **USB**

Los informes de los ciclos quedan automáticamente guardados en la memoria del autoclave y, sucesivamente, se pueden descargar a través del puerto USB ubicado al frente. Los archivos en formato PDF se pueden ver en cualquier dispositivo.

**C-17 C-22 C-28**  
**SIMPLE Y PRESTANTE**

Datos técnicos	C-17	C-22	C-28
Tensión de alimentación	220/240V 50Hz 220/230V 60Hz		
Potencia nominal	2300 W		
Dimensiones externas A x H x P	480 x 500 x 600 mm		
Dimensiones Cámara D x P	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Peso total	50 kg	51 kg	52 kg
Capacidad depósito	4,5 litros		
Autonomía [con nivel máx. de agua]	De 7 a 11 ciclos	De 6 a 10 ciclos	De 5 a 9 ciclos

CICLO	Tipo de ciclo	Tiempo de esterilización [min.]	C-17	C-22	C-28	Secado *
Tiempos ciclo incluyendo el tiempo de esterilización y excluyendo el tiempo de secado [min.]						
134 °C UNIVERSAL	B	4	29	31	39	13-17
121 °C UNIVERSAL	B	20	45	48	52	13-17
134 °C HUECOS NO ENVASADOSI	S	4	31	34	38	4-6
134°C SÓLIDOS ENVASADOS	S	4	20	24	28	13-17
134°C PRIÓN	B	18	43	45	53	13-17
XXX °C CUSTOM	S	Ciclo personalizable por el usuario con temperaturas 134 °C / 121 °C, tiempos de proceso a partir de 4' (134 °C) o 20' (121 °C) y secado programable.				
TEST DE VACÍO		TEST	18	18	19	
HELIX/B&D TEST		TEST	20	24	28	
VACUUM + HELIX/B&D TEST [ejecutados en secuencia]		TEST	42	46	51	

\* El secado varía en función del modelo y del volumen de la máquina  
 Nota: los tiempos no consideran el intervalo de precalentamiento máx. [10 min.].  
 Nota: el tiempo puede variar en función de la carga y de la alimentación eléctrica.  
 Nota: el tiempo referido a los modelos de 120 V puede sufrir incrementos de hasta un máximo del 20%



**Mundo Médico Dental**



**944 991 108**



**945 002 936**



**ventas1@mml.pe**



**www.mml.pe**

